



Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00

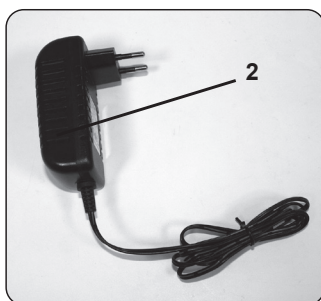

17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551

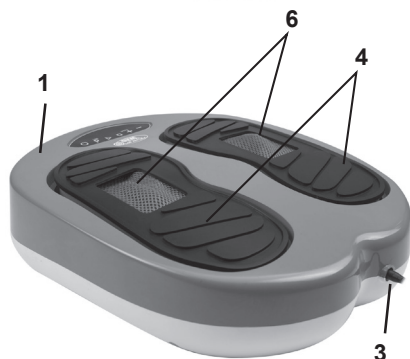

ISL GmbH
Ostseestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-deutschland.com
+49 (0) 441 95 07 08-0



PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct (International) Benelux B.V.
28, 3871 MM
The Netherlands

Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se



ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano- Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com
+39 02 668 23 708



ČEŠTINA

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím posilovacího stroje Gymform® Leg Action si přečtěte návod k použití. Gymform® Leg Action vždy pokládejte na rovný povrch.

Zajistěte, aby děti nepoužívaly Gymform® Leg Action bez dozoru dospělé osoby.

Nedovolte, aby se Gymform® Leg Action dostal do kontaktu s vodou.

Nepoužívejte Gymform® Leg Action, pokud máte mokré ruce.

Po použití zařízení odpojte ze zásuvky.

Stejně jako u jakéhokoli jiného zařízení pro fyzické cvičení se před zahájením používání Gymform® Leg Action poraďte se svým lékařem.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Tento výrobek není určen pro lékařské použití. Je určen pouze k masáží.

Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud:

Jste těhotná

Máte kardiostimulátor, implantát nebo jiné pomůcky

Trpíte cukrovkou

Máte poruchu krevního oběhu

Máte obavy o své zdraví

Starší a nemocní lidé by se měli před použitím přípravku poradit se svým lékařem, a to i v případě, že nemají žádné specifické předchozí potíže.

Vzhledem k tomu, že tření kůže může být bolestivé, doporučuje se nepřikládat přístroj přímo na kůži. Pokud pocítíte nepříjemné pocity nebo bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat.

Nepoužívejte tento výrobek před spaním. Masážní přístroj má stimulační účinek a může oddálit spánek. Abyste zabránili zkratu, přístroj správně připojte a uchovávejte jej mimo dosah kovu (jehel), odpadu a vody.

Zařízení používejte na rovném povrchu. Pokud není zařízení stabilní, mohlo by se převrhnout a způsobit zranění.

Pokud zařízení nepoužíváte, vyjměte adaptér ze zásuvky.

Máte-li podezření na problém, vypněte zařízení co nejdříve.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte jej v obalu na bezpečném, suchém a chladném místě.

Na masážní přístroj nepokládejte žádné jiné předměty.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn, ale pouze autorizovanou a kvalifikovanou osobou.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj na mokré pokožce.

Výrobek uchovávejte mimo dosah vlhkosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je on nebo jeho části mokré nebo vlhké.

Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších osmi let.

Abyste předešli zranění a nenapravitelnému poškození, při používání masážního přístroje vždy sedněte. Abyste předešli nebezpečným zraněním, nikdy na přístroji nestůjte a nepoužívejte jej násilím. Nepokoušejte se výrobek rozebrat nebo opravovat. Opravy smí provádět pouze příslušně kvalifikovaní technici.

Popis produktu:

1. Hlavní jednotka Gymform® Leg Action
2. Napájecí adaptér
3. Napájecí konektor
4. Podložky pod nohy
5. Ovládací panel
6. Shiatsu masážní válečky
7. Dálkové ovládání
8. Tlačítko ON/OFF
9. Tlačítko Start / Stop
10. Tlačítko Více času (Cas+)
11. Tlačítko méně času (Time-)
12. Tlačítko Více rychlosti (Rychlost+)
13. Tlačítko menší rychlosti (Speed-)
14. Tlačítko automatického programu (P) na dálkovém ovladači
15. Tlačítko ručního programu (M) na dálkovém ovladači
16. Programovací tlačítko (P) na přístroji
17. Tlačítko pro zastavení přístroje
18. Panel displeje
19. Tlačítko pro spuštění zařízení
20. - Tlačítko na zařízení
21. + Tlačítko na zařízení

Sada obsahuje:

- 1 hlavní jednotka Gymform® Leg Action
- 1 dálkový ovladač
- 1 návod k použití
- 1 Průvodce cvičením

Návod k použití
Provozní funkce
Rychlosti od 1 do 15.

Šest speciálně navržených programů.

Poznámka:

Přístroj je určen k použití na chodidlo, nohy a záda. Nepoužívejte jej na pas, krk nebo jiné části těla, které nejsou popsány v tomto návodu. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této příručce a v průvodci cvičením.

1. Umístěte přístroj (1) na rovný a rovný povrch.

2. Zapojte jeden konec adaptéru (2) do elektrické sítě a druhý do napájecí zásuvky (3).

3. Funkce přístroje Gymform® Leg Action lze volit na ovládacím panelu (5) na přístroji nebo na dálkovém ovladači (7), jak je popsáno níže. Dálkové ovládání funguje na dvě baterie AAA (nejsou součástí dodávky). Vložte je do prostoru pro baterie podle značek polarit.

4. Chcete-li zařízení zapnout a vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF (8).

5. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko "P" (14) na dálkovém ovladači a zvolte jeden ze čtyř automatických programů Gymform® Leg Action (P1, P2, P3 a P4). Stisknutím tlačítka "M" (15) na dálkovém ovladači zvolte jeden ze dvou manuálních programů (M0 a M1). Chcete-li zvolit program na přístroji, stačí stisknout tlačítko Program (P) na přístroji (16). Stisknutím tohoto tlačítka přepnete z automatického na manuální program. Zvolené nastavení se zobrazí na panelech displeje (18).

6. (viz tabulka programů).

Tabulka programu:

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

P1 –

Pouze vibrace:

Rozsah úrovní intenzity: 6-15

Doba trvání: 10 minut

P2 –

Vibrace a vibrace + masáž

1 minuta.....vibrace

2 minuty.....vibrace + masáž

3 minuty.....vibrace

4 minuty.....vibrace + masáž

5 minut.....vibrace

6 minut.....vibrace + masáž

7 minut.....vibrace

8 minut.....vibrace + masáž

9 minut.....vibrace

10 minut vibrace + masáž

Rozsah úrovní intenzity: 9-15

Doba trvání: 10 minut

P3 –

Pouze vibrace

Rozsah úrovní intenzity: 9-15

Doba trvání: 10 minut

P4–

Vibrace a vibrace + masáž

2 minuty.....vibrace

2 minuty.....vibrace + masáž

3 minuty.....vibrace

3 minuty.....vibrace + masáž

Rozsah úrovní intenzity: 9-15

Doba trvání: 10 minut

MANUÁLNÍ PROGRAMY

M0

Manuální program, pouze vibrace

Rozsah úrovní intenzity: 1-15

Doba trvání: 10 minut

M1

Manuální program, vibrace + masáž

Rozsah úrovní intenzity: 1-15

Doba trvání: 10 minut

7. Stisknutím tlačítka Start/Stop (9) ► spustíte a zastavíte zvolený program.

8. U automatických programů není možné nastavit čas ani rychlost.

9. Pokud zvolíte jeden ze dvou manuálních programů (M0 a M1), můžete nastavit čas 1 až 10 minut před spuštěním programu.

- Stisknutím tlačítka zkrácení času (T-) (11) na dálkovém ovladači nebo tlačítka

- na přístroji (20) čas zkrátíte.

- Stisknutím tlačítka More Time (T+) (10) na dálkovém ovladači nebo tlačítka + na jednotce (21) čas prodloužíte.

10. Po zvolení času stiskněte tlačítko Start/Stop (9) ► na dálkovém ovladači nebo tlačítko Start (19) ► na přístroji pro spuštění programu. Po zahájení programu můžete kdykoli nastavit rychlost (od 1 do 15).

- Stisknutím tlačítka Další rychlost (S+) (12) zvýšíte rychlost.

- Stisknutím tlačítka Menší rychlost (S-) (13) rychlost snížíte.

11. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte nejprve tlačítko Start/Stop (9) ► na dálkovém ovladači nebo tlačítko Stop na zařízení □ (17). Poté stiskněte tlačítko ON/OFF na zařízení, abyste jej zcela vypnuli.

12. Po použití odpojte zařízení od elektrické sítě.

Polohy pro používání zařízení:

Přístroj lze používat také na nohou a zádech. O způsobu použití výrobku se informujte v příručce ke cvičení.

POZNÁMKA: Nikdy na zařízení nepůsobte celou svou vahou, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

ČISTĚNÍ

Před čištěním zařízení vždy odpojte zástrčku od elektrické sítě.

Zařízení a podložky pod nohy (4) otřete vlhkým hadříkem a jemným mýdlem.

Nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky. Podložky pod nohy lze pro snadné čištění vyjmout (4).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: 24,0 V



Výkon: 30 W

Technické specifikace adaptéru

Vstupní napětí: 24 V: 100-240 V

Výstup 24,0 V



1,5 A

Technické informace o adaptéru FY0422401500E

Získaný výrobek, "GYMFORM LEG ACTION, ref. VDPGYCIND0090", je určen pouze pro práci s adaptérem popsaným v tabulce(*).

V zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob nedoporučujeme používat tento adapter s žádným jiným zařízením.

(*)

Název nebo ochranná známka výrobce, obchodní registrační číslo a adresa /

Identifikátor modelu /

Vstupní napětí /

Vstupní frekvence střídavého proudu /

Výstupní napětí /

Výstupní proud /

Výstupní výkon /

Průměrná činná účinnost /

Účinnost při nízkém zatížení (10%) /

Spotřeba energie bez zátěže /

POUZE AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

Na tento výrobek se vztahují určité spotřebitelské záruky. Ty jsou předepsány austrálským spotřebitelským zákonem a novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách z roku 1993, které poskytují ochranu spotřebitelům. Na tento výrobek se v Austrálii ani na Novém Zélandu nevztahuje žádná výslovná záruka. Výše uvedený odstavec se vztahuje na ostatní země.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v rámci lhůt stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.



POZOR

LIKVIDACE MATERIÁLŮ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že byste se měli informovat o místních předpisech týkajících se likvidace tohoto druhu výrobků a dodržovat je.

Nelikvidujte tento výrobek jako jiný odpad z domácnosti.

Tento přístroj likvidujte v souladu s příslušnými místními předpisy.

Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a/nebo lidské zdraví, a proto by měla být řádně recyklována.

Vyrobeno v Číně.