


VIBRATONE
PRO
by VELFORM®

VELFORM® is a registered EU trademark. International patents pending. All imitations will be prosecuted.

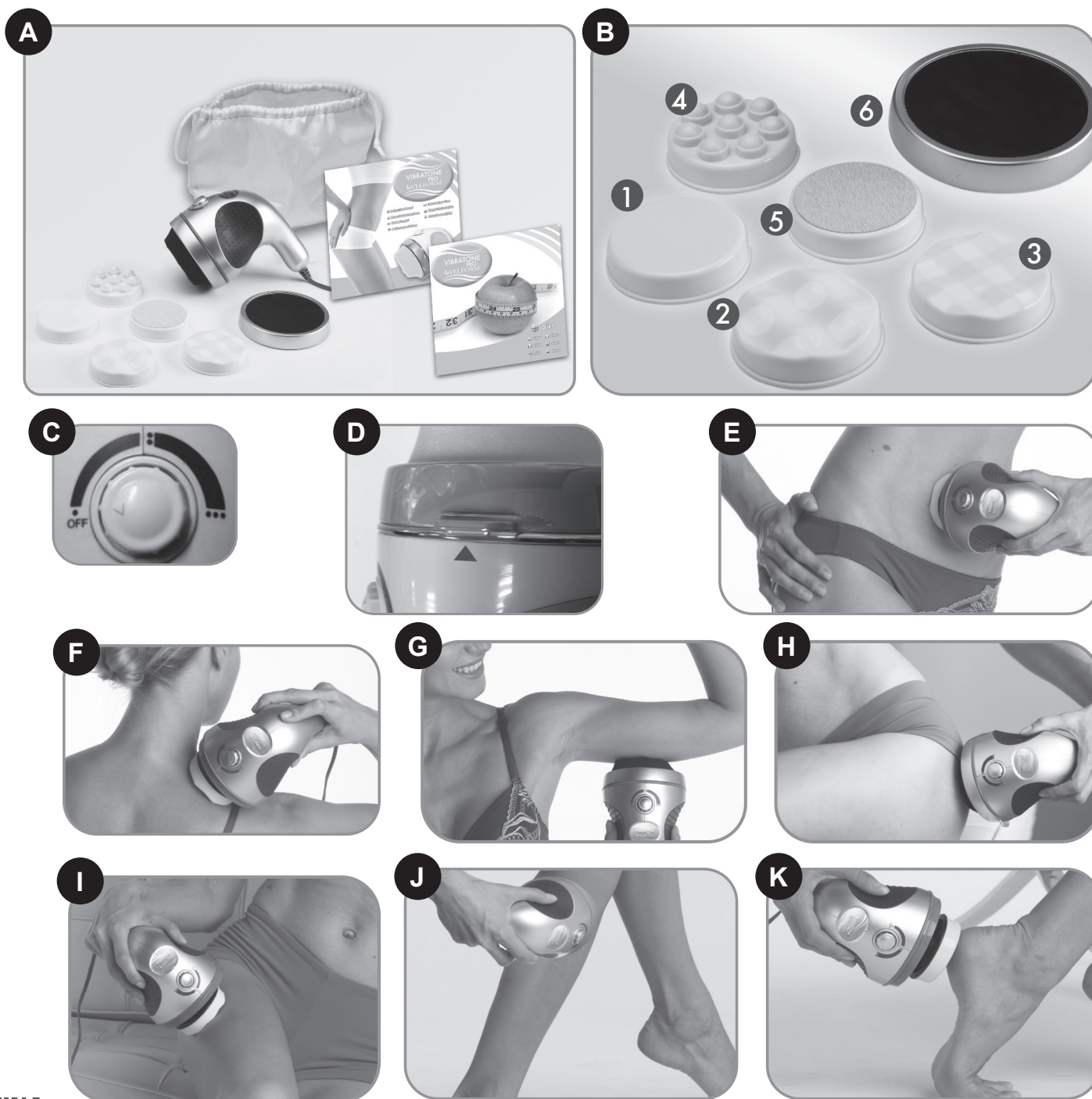

ČEŠTINA

Děkujeme, že jste si zakoupili Vibratone Pro by Velform®. Vibratone Pro by Velform® je inspirován profesionálními přístroji určenými k redukci celulitidy, ochablosti a zadržování tekutin. Vibratone Pro by Velform® poskytuje intenzivní a hlubokou podkožní masáž prostřednictvím rotace a vibrací, čímž pomáhá zlepšit krevní oběh, podporuje lepší vzhled pokožky, tonizuje svaly, tvaruje postavu, pomáhá snižovat výskyt celulitidy a podporuje vylučování tekutin.

Jeho ergonomický design z něj dělá dokonalého spojence pro časté používání.



PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ:

- Vibratone Pro by Velform® nepoužívejte, pokud jste těhotná, máte srdeční problémy nebo tělesná zranění.
- **DŮLEŽITÉ:** Nepoužívejte výrobek v případě, že má uživatel v těle implantovaná zařízení, jako jsou kardiostimulátory, nitroděložní tělíska, šrouby atd.
- Vibratone Pro by Velform® uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vibratone Pro by Velform® nepoužívejte, pokud trpíte trombózou nebo se léčíte.
- Vibratone Pro by Velform® nepoužívejte 1 hodinu před jídlem nebo po něm.
- Pokud trpíte závažnými zdravotními potížemi, poraďte se před použitím přípravku Vibratone Pro by Velform® se svým lékařem.
- Nepoužívejte Vibratone Pro by Velform® v blízkosti vody nebo s mokřými rukama.


Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00


17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551


ISL GmbH
Ostseestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-deutschland.com
+49 (0) 441 95 07 08-0


PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct (International) Benelux B.V.
28, 3871 MM
The Netherlands
Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se


ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano - Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com
+39 02 668 23 708



- Pokud zaznamenáte jakékoli potíže, okamžitě přestaňte přípravek používat.
- Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Vibratone Pro by Velform® nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Vibratone Pro by Velform® není lékařský ani terapeutický přístroj.
- V případě pochybností se o použití přípravku poradte se svým lékařem.
- Nepoužívejte přípravek na místa se záněty nebo vyrážkami.
- Nepoužívejte přípravek déle než 5 minut na stejné části těla.
- Přípravek nepoužívejte před spaním, protože masáž může mít stimulační účinek.
- Nepoužívejte přípravek vleže v posteli.
- Tento spotřebič se nedoporučuje používat osobám (včetně dětí), které nemají dobré fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo nezkušeným osobám, které nevědí, jak spotřebič používat, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným prodejcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nepoužívejte výrobek bez hlavice.
- Pokud je hlavice rozbitá, nelze spotřebič používat.

Používání přístroje Vibratone Pro by Velform® má díky hluboké podkožní masáži, kterou zajišťuje kombinace vibrací a rotace, mnohostranné blahodárné účinky na vaše tělo:

- Modeluje postavu s jejím rotačním pohybem a vibracemi.
- Snižuje výskyt celulitidy: poskytuje hloubkovou a intenzivní masáž. Zlepšuje se vzhled pokožky, redukuje se poměračňova kůže.
- Pomáhá uvolnit oblasti svalového napětí: pomocí Vibratone Pro by Velform® s nízkou intenzitou poskytuje pocit pohody v oblastech, kde se koncentruje svalové napětí.

Sada obsahuje: (A)

- Masážní přístroj Vibratone Pro by Velform®
- Hladká hlava: pro relaxační masáž
- Velká vlnová hlava: pro tonizační a tvarovací masáž velkých ploch
- Malá vlnová hlavice: pro tonizující a tvarovací masáž malých ploch
- Hlava s kuličkami: pro redukční a zpevňující masáž
- Pilníková hlava: pro pilování ztvrdlé kůže na chodidlech
- Ochranná síťka: pro příjemnější masáž hlavy
- Cestovní toaletní taška
- Dieta
- Návod k použití

TIPY, JAK JI POUŽÍVAT:

- Pokud si přejete, můžete kromě Vibratone Pro by Velform® používat i zpevňující krémy nebo krémy proti celulitidě.
- Nepoužívejte Vibratone Pro by Velform® déle než 5 minut na jednu zónu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: (B)

- Hladká hlava (1): ideální pro uvolňující masáž, která snižuje nahromaděné napětí.
- Velká vlnová hlava (2): ideální pro tonizující a tvarovací masáž v obtížných oblastech, kde se koncentruje tuk, jako je břicho, stehna a hýždě.

- Hlavice s malými vlnami (3): ideální pro tonizační a tvarovací masáž k ošetření lokalizovaného tuku v malých oblastech, jako jsou paže nebo boky.

- Kulová hlava (4): ideální pro ztuhlující masáže, zpevňující účinek.
- Pilníková hlava (5): ideální pro pilování ztvrdlé kůže na chodidlech. S touto hlavici nepoužívejte krémy.

Síťka (6): síťku umístěte přes hlavu, pokud je oblast obzvláště citlivá, abyste usnadnili masáž při použití Vibratone Pro by Velform® přímo na pokožce. Síťku používejte pouze s hladkou nebo vlnitou hlavici. Při masáži oblasti ramen se doporučuje používat síťku, aby se zabránilo zamotání vlasů do maséřské hlavice. Při použití sítky nepoužívejte krémy.

PŘEPÍNAČ STÍMIVAČE
Regulátor intenzity (C) umožňuje přizpůsobit masáž ošetřované části těla. Nízká intenzita se doporučuje pro citlivější oblasti, jako jsou paže, nohy, břicho, nohy s křečovými žilami, záda, ramena... Vysoká intenzita se doporučuje pro oblasti s lokalizovaným tukem, jako jsou

stehna a hýždě.

ČETNOST POUŽITÍ

Zpočátku se doporučuje používat Vibratone Pro by Velform® jednou denně a 2-3krát týdně v rámci údržby. Na jednu oblast používejte maximálně 5 minut.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Stisknutím připojte hlavu, kterou chcete použít. V případě potřeby umístěte na hlavu ochrannou síťku jejím přitlačením. (D)
- Pomocí voliče intenzity zvolte intenzitu masáže.
- Po skončení masáže otočte volič intenzity do polohy OFF.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- E- Předlokti: pro zpevnění podpaží
- F- Ramena a záda: ideální pro snížení nahromaděného napětí a uvolnění této oblasti.
- G- Břicho: ideální pro tvarování břišní partie a pomoc při redukci lokálního tuku
- H- Hýždě a boky: ideální pro zpevnění a redukci nepoddávaného tuku.
- I- Stehna: ideální pro tvarování, tonizaci a redukci lokalizovaného tuku.
- J- Nohy: ideální pro snížení svalového napětí.
- K- Chodidla: ideální pro pilování ztvrdlé kůže na chodidlech

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Po odpojení spotřebiče ze zásuvky jej vyčistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky. Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě, doporučujeme jej uchovávat v toaletní skřínce spolu s hlavici.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady ve lhůtách stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.

ELIMINACE

Pokud se rozhodnete tento spotřebič, baterii a/nebo napájecí adapter zlikvidovat, odevzdejte je v zájmu ochrany životního prostředí do speciálních kontejnerů na elektrická a/nebo elektronická zařízení.

CERTIFIKÁTY A PŘEDPISY

Tento výrobek je v souladu se směrnicí o nízkém napětí 2006/96/ES, směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnicí o ekologickém designu 2009/125/ES, směrnicí o omezení používání nebezpečných látek 2002/95/ES a certifikáty LFGB a REACH.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon - 25 W
Frekvence - 50 Hz
Napětí - 220V - 240V
Minimální otáčky: 900
Maximální otáčky: 2800



Toto zařízení má dvojistou izolaci; proto nevyžaduje zemní spojení. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku zařízení.



JAK LIKVIDOVAT MATERIÁLY

Symbol přeskřítnuté popelnice na kolečkách označuje, že se musíte informovat a dodržovat místní předpisy pro likvidaci tohoto typu výrobku. Nelikvidujte tento výrobek stejným způsobem, jako byste likvidovali běžný domovní odpad. Musíte jej zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

Elektrické a elektronické výrobky obsahují nebezpečné látky, které mají škodlivé účinky na životní prostředí nebo lidské zdraví a musí být řádně recyklovány. Baterie musí být likvidována odděleně. V zájmu ochrany životního prostředí by se baterie, a to ani dobíjecí, neměly likvidovat stejným způsobem jako běžný domovní odpad. Odevzdejte je na shromaždiště a zkontrolujte, zda splňujete platné zákonné požadavky na likvidaci baterií.

Vyrobeno v Číně